
¿Qué sucede si suenan las alarmas del dispositivo RENASYS◊ EDGE?

Eldispositivo RENASYSEDGE estáequipado conalarmas y alertas para indicar un error que requiere la intervención del usuario. La mayoría de los problemas se solucionan fácilmente, por ejemplo:


Consulte el manual para obtener instrucciones de uso completas.




Obstrucción: si hay una obstrucción o doblez en el tubo, o el recipiente está lleno, sonará la alarma. Se debe cambiar el recipiente o quitar la obstrucción del tubo.

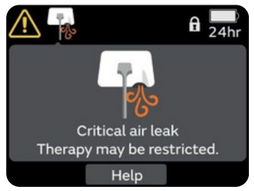

Pérdida de aire: el dispositivo mostrará una alerta cuando se detecte una pérdida de aire moderada y hará sonar una alarma cuando se detecte una pérdida de aire crítica. Revise el sello del apósito o la conexión del tubo.

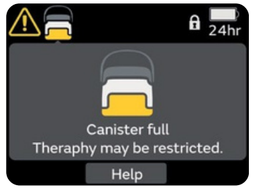


Recipiente lleno: el dispositivo detectó que el recipiente está lleno.

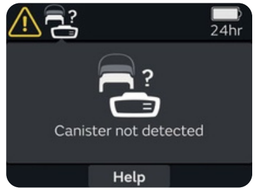

Recipiente faltante: el dispositivo no puede detectar un recipiente conectado correctamente. Para solucionar el problema, vuelva a colocar el recipiente o reemplácelo.




Batería baja: el dispositivo emitirá una alerta cuando resten menos de 2 1/2 horas de batería y una alarma cuando resten 20 minutos. Para solucionar el problema, enchufe
el cable eléctrico en el tomacorriente lo antes posible. Cargue el dispositivo durante 2 1/2 horas como máximo.

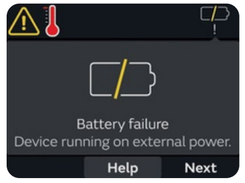

Vacío alto o falla de la batería: el dispositivo detectó una falla interna o una falla de la batería. Apague el dispositivo y reinícielo.



Demasiado caliente: el dispositivo emitirá una alerta si la temperatura de la batería es demasiado alta para cargarla y una alarma si la temperatura de funcionamiento es demasiado alta. Para solucionar el problema, saque el dispositivo de cualquier bolsa o elemento que lo cubra, y llévelo a un lugar más frío para que baje su temperatura.

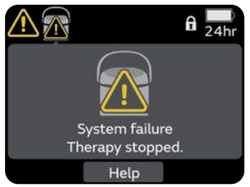

El tratamiento se pausó demasiado tiempo: el dispositivo se pausó durante más de 30 minutos. Para solucionar el problema, inicie el tratamiento presionando el botón Play/Pause (Reproducir/Pausa).



Espuma con orificio blando

¿Cómo se verán los apósitos cuando el tratamiento sea eficaz?

Los apósitos se encogerán, tendrán el aspecto de uvas pasas y serán firmes al tacto.



Información de seguridad importante: para obtener información detallada sobre el producto, incluidas las indicaciones de uso, contraindicaciones, precauciones y advertencias, consulte las instrucciones de uso correspondientes del producto antes de utilizarlo.