Paso a Paso

INSTALACIÓN DE LA BOLSA DE ASPIRACIÓN SERRES


Siga estos pasos para garantizar una instalación segura y eficiente

1



Estire y luego introduzca la Bolsa Serres dentro del Canister

2

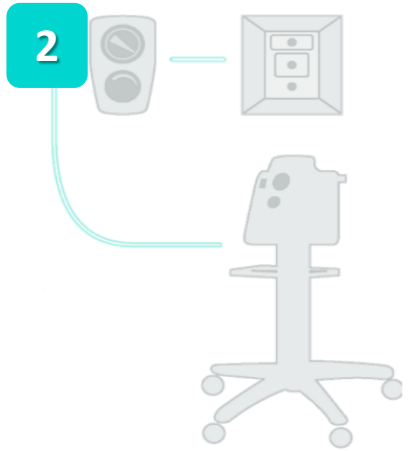

Active la Red de Vacío

3



Presione firmemente en el centro de la tapa Turquesa

4



Una vez que la bolsa se haya expandido dentro del canister, coloque su dedo en el puerto del paciente, hasta lograr el sello.

5



Conecte el tubo de aspiración a la conexión única de paciente (codo blanco)

6



Sistema listo para usar

SISTEMA CERRADO Y SEGURO

FÁCIL DE INSTALAR Y USAR

DISEÑO INTUITIVO Y ERGONÓMICO

DESECHABLE Y SOSTENIBLE

IMPORTANTE: Siga siempre las instrucciones de uso y los protocolos de su institución.